




## BIOPLAST® Sportmundschutz

Für jede Anforderung der richtige Sportmundschutz-Typ

Bei  
**SCHEU-DENTAL**  
finden Sie das  
passende Material  
für jeden Einsatz-  
bereich!


# Für jede Anforderung:

## Drei Sportmundschutz-Typen

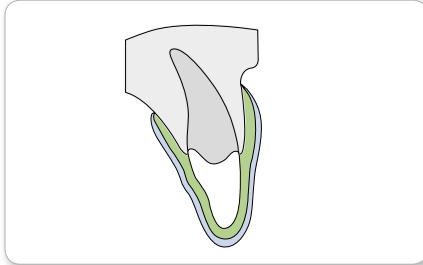


### BIOPLAST® MASTER:

- Für alle Aktivitäten im Freizeit- und Breitensport.
- Zweischichtiger Folienaufbau mit hohem Schutz und Tragekomfort.
- Es stehen diverse Farben und Farbkombinationen zur Auswahl.

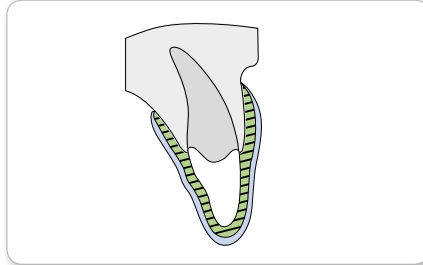

### BIOPLAST® XTREME/DECO:

- Geeignet für Kontaktsportarten, Schutz vor harten und kleinflächigen Schlägen.
- Zweischichtiger Folienaufbau mit bestem Schutz und Tragekomfort.
- Mit integriertem Verstärkungsegment im Frontzahnbereich.

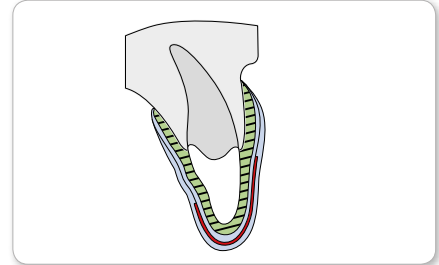

### BIOPLAST® XTREME PRO:

- Für Kontaktsportarten im Profisport mit zu erwartenden kleinflächigen und harten Schlägen (Schlagkräfte werden flächig verteilt).
- Vierschichtiger Folienaufbau für ein Höchstmaß an Schutz und Tragekomfort.
- Mit integriertem Verstärkungsegment und ergänzender hart-elastischer Zwischenlage im Frontzahnbereich.

## BIOPLAST® MASTER

Das Sortiment der BIOPLAST® COLOR und MULTICOLOR Produktlinie weist eine Vielzahl an Farben und Mustern aus. Somit ist der Individualisierung keine Grenze gesetzt.



### BIOPLAST® COLOR\*\*

// 3,0 x 125 mm*	○ klar	#3187
// 3,0 x 125 mm*	○ blau-transparent	#3356
// 3,0 x 125 mm*	○ rot-transparent	#3355
// 3,0 x 125 mm*	○ weiß	#3445
// 3,0 x 125 mm*	● schwarz	#3448
// 3,0 x 125 mm*	● neonrot	#3352
// 3,0 x 125 mm*	● neongrün	#3353
// 3,0 x 125 mm*	● azurblau	#3354
// 3,0 x 125 mm*	Je ein Stück klar, blau-transparent, rot-transparent, gelb, rot, weiß, schwarz, neonrot, neongrün, azurblau.	#3271

\* jeweils 10 Stück  
Die Farben gelb und rot sind ausschließlich im Color-Set und nicht einzeln erhältlich.

### BIOPLAST® MULTICOLOR\*\*

// 3,0 x 125 mm*	🇩🇪 Germany	#3390
// 3,0 x 125 mm*	🇫🇷 France	#3391
// 3,0 x 125 mm*	🇮🇹 Italy	#3392
// 3,0 x 125 mm*	🇪🇸 Spain	#3393
// 3,0 x 125 mm*	🇸🇪 Sweden	#3394
// 3,0 x 125 mm*	🇧🇷 Brazil	#3395
// 3,0 x 125 mm*	🇷🇴 Transylvania	#3396
// 3,0 x 125 mm*	🌊 Atlantis	#3397
// 3,0 x 125 mm*	○ White Dots	#3398
// 3,0 x 125 mm*	● Green Dots	#3399
// 3,0 x 125 mm*	○ Multicolor Set	#3400

\* jeweils 10 Stück




\*\* Basismaterial.  
Für eine ausreichende Schutzwirkung muss eine 2. Schicht auflaminiert werden.

CE

CE

# BIOPLAST® XTREME/DECO

Eine Tiefziehfolie – zwei Härtegrade!

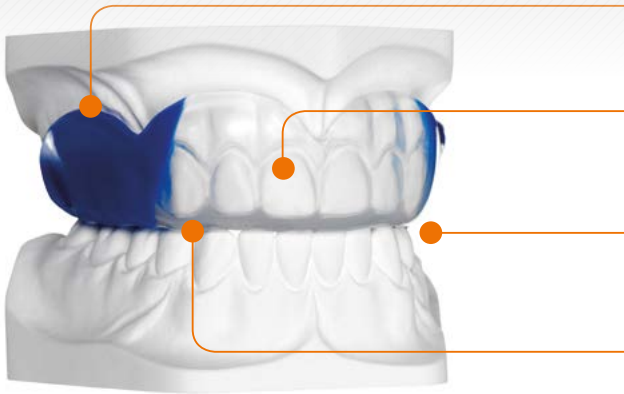

**Farbiges Seitensegment** aus BIOPLAST® 3,0 mm Shore 80 A

**Frontales, klar-transparentes Verstärkungssegment** aus BIOPLAST® XTREME 3,0 mm Shore 92 A

Das **V-Design** der Folie erlaubt ein Verschieben des Modells, so dass jeweils die individuelle Frontzahnbreite durch das Verstärkungssegment erfasst wird.

**Laminierte Abschlussfolie**, klar-transparent aus BIOPLAST® 2,0 mm Shore 80 A bzw. 1,0 mm (BIOPLAST® XTREME PRO)



Eine neue Fertigungstechnologie ermöglicht eine mehrfarbige Gestaltung der Folien mit fotorealistischen Motiven.



## BIOPLAST® XTREME PRO

Neben der integrierten Verstärkung im Frontzahnbereich verfügt dieser Sportmundschutz zusätzlich über eine hartelastische Zwischenlage.



### BIOPLAST® XTREME

// 4,0 x 125 mm*	● rot	#3295
// 4,0 x 125 mm*	● blau	#3296
// 4,0 x 125 mm*	● schwarz	#3297
// 4,0 x 125 mm*	○ klar	#3298
// 5,0 x 125 mm*	● rot	#3286
// 5,0 x 125 mm*	● blau	#3287
// 5,0 x 125 mm*	● schwarz	#3288
// 5,0 x 125 mm*	○ klar	#3289

\* jeweils 10 Stück. Nur für MINISTAR® ab 4/92 und BIOSTAR® ab 4/99

CE

// BIOPLAST® XTREME Kit*	● rot	#3283
1x BIOPLAST® XTREME-Folie (5,0 x 125 mm), 1x CETRON® Reinigungspulver à 15 g, 1x BIOPLAST®-Isoliermittel, Retainerdose		
// BIOPLAST® XTREME Kit*	● blau	#3284
Inhalt wie oben		
// BIOPLAST® XTREME Kit*	● schwarz	#3285
Inhalt wie oben		

\* nur für MINISTAR® ab 4/92 und BIOSTAR® ab 4/99

CE

### BIOPLAST® XTREME DECO

// 5,0 x 125 mm*	chinese	#3312
// 5,0 x 125 mm*	dragon	#3313
// 5,0 x 125 mm*	kiss	#3314
// 5,0 x 125 mm*	aqua	#3315
// 5,0 x 125 mm*	stone	#3316
// 5,0 x 125 mm*	lion	#3317

\* jeweils 5 Stück. Nur für MINISTAR® ab 4/92 und BIOSTAR® ab 4/99

CE

### BIOPLAST® XTREME PRO

// BIOPLAST® XTREME PRO Kit*	● rot	#3292
1x BIOPLAST® XTREME-Folie (4,0 x 125 mm), 1x BIOPLAST®-Folie klar (2 mm), 1x DURAN®-Folie (0,75 mm), 1x CETRON® Reinigungspulver à 15 g, 1x BIOPLAST®-Isoliermittel, Retainerdose		
// BIOPLAST® XTREME PRO Kit*	● blau	#3293
Inhalt wie oben		
// BIOPLAST® XTREME PRO Kit*	● schwarz	#3294
Inhalt wie oben		

\* nur für MINISTAR® ab 4/92 und BIOSTAR® ab 4/99

CE

# Zubehör



## Retainerdosen

Für eine saubere, hygienische Aufbewahrung des BIOPLAST®-Sportmundschutzes. In fünf Farben.

### // Retainerdosen

#5435

\* jeweils 10 Stück.



## Finier-Set

Sortiment mit acht Schleifkörpern – mit Farbcodierung zur einfachen Zuordnung – zum Trennen, Ausarbeiten und Finieren von weichelastischen und hartelastischen Folien.

### // Finier-Set

#3378

inkl. je 1 Trennfräser, Finierfräser, HM-Schneidfräser, HM-Tricutter fein, BIOPERM-Trimmer, POLYFIX, OSAMU-Polierer, DIMO®PRO SLIM und Zuchtstein



## Trimmer und Polierer

Für optimale mechanische End- und Feinbearbeitung der BIOPLAST®-Folien. BIOPERM-Trimmer zur Randbearbeitung. POLYFIX zur Freilegung der Lippen-/Wangenbänder. OSAMU-Polierer zur Glanzpolitur.

### // BIOPERM-Trimmer

blau, 2 Stück

#3226

### // POLYFIX auf Mandrell

braun, 1 Stück

#3371

### // POLYFIX

braun, 6 Stück

#3372

### // OSAMU-Polierer

grau, 2 Stück

#3247



## DIMO®PRO

Elastomergefüllte, hoch standfeste Ausarbeitungsscheibe für BIOPLAST®-Folien, inkl. Mandrell.

### // DIMO®PRO

Scheibe 24 x 6 mm

#3381

### // DIMO®PRO SLIM\*

Scheibe 24 x 4 mm

#3376

jeweils 10/50 Stück \* zum Rand verjüngt



## BIOPLAST®-Isoliermittel

Isolierung für Gipsmodelle bei der Verarbeitung von BIOPLAST®-Tiefziehfolien, speziell bei Positioner und Sportmundschutz. Sorgt für absolute Transparenz und glatte Innenflächen.

### // BIOPLAST®-Isoliermittel, 500 ml

#3189



## Druckwerke

Flyer und Poster zur Patienteninformation, erhältlich in deutsch und englisch.

### // BIOPLAST® Patientenflyer

#0308

### // BIOPLAST® Poster

#0388

Weitere Informationen über die Herstellung des BIOPLAST®-Sportmundschutzes entnehmen Sie bitte unseren Anwendungsbroschüren und dem Herstellungsvideo unter [www.scheu-dental.com](http://www.scheu-dental.com).

DE 1.000/11/17 G REF 0373.01

